

Doküman No: IFU-GSG Documentation No: IFU-GSG	İlk yayın tarihi: 02/05/2012 Valid from: 02/05/2012	Revizyon no: 01 Revision no: 01	Sayfa:1 Page:1
		Revizyon tarihi: 26.05.2016 Revision date:26.05.2016	

GEOTEK® TAŞ TUTUCU

TR

Kullanma Kılavuzu

Taş tutucu, 3 tellidir.

Endikasyonlar: Üretra, mesane veya böbrek taşlarının perkutan olarak çıkarılmasında kullanılır

Kontraindikasyonlar: Enfeksiyonlar, sürekli obstrüksiyon, inkontinans

Olası komplikasyonlar ve / veya riskler: İşlem sırasında üretranın zarar görmesi, perforasyonu ve kanama.

Uyarılar: Bu ürün sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojektir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve stent ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. Serin ve kuru yerde saklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız.

Prosedür:

- Taş tutucuyu kapalı pozisyonda üreteroskop kanalına sokarak ilerletin.
- Taşın üzerine geldiğinde, taş tutucu sapındaki arka parçayı ileri doğru iterek tutucuyu açın
- Taş kavradiğında emin olduğunuzda sapın arka parçasını ters istikamete çekerek basketi kapatın. Taş, tutucunun içine hapsolmuş durumdadır.
- Taş tutucunun kapalı pozisyonunu bozmadan, geri çekerek, dikkatli bir şekilde üreteroskoptan çıkartınız.

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.

GEOTEK® STONE GRASPER

ENG

Instruction for Use

Stone Grasper has 3 wires.

Indications: intended for stone manipulation and removal in the urinary track. This made out of Medical Grade Stainless Steel (304). Intended for one time use.

Contraindications: Infections, obstruction, incontinence

Potential Complications and risks: Potential damages of urethra, perforation and bleeding.

Cautions: This product should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Ethylene oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. For single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use

Procedure:

- Be sure the stone grasper in closed position and introduce it to urethroscope channel.
- Advance the stone grasper till the stone site and open the grasper over stone with pushing forward to handle.
- Pull back the handle to close the grasper. Be sure that hold the stone firmly.
- Pull back the stone grasper through urethroscope carefully while keeping firmly the stone grasper in closed position.

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.




1984 : CE mark and NB identification number

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12
YENİMAHALLE -ANKARA
TEL:+90312 3959852
FAX:+90312 3959853



Single Use

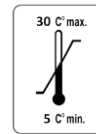

Storage limits



Expiry Date

STERILE EO

Ethylene oxide sterilized