

Doküman No: IFU-GUDS Documentation No: IFU-GUDS	İlk yayın tarihi: 02/05/2012 Valid from: 02/05/2012	Revizyon no: 01 Revision no: 01	Sayfa:1 Page:1
		Revizyon tarihi: 26.05.2016 Revision date:26.05.2016	

GEOTEK® URETERAL ACCESS SHEATH

Instruction for Use

ENG

Indications: provides ureteral dilation and a continous working channel for the introduction of endoscopes and instrument during ureteral access procedures. The sheath protect the ureter, delicate instrument and the smaller flexible scopes during repeated instrument exchange reducing the potential of trauma

used in conjunction with the amplatz type dilators and / or balloon dilators during renal dilatation to provide non – traumatic working tract after removal of the dilator.

Contraindications: Infections, obstruction, incontinence

Potential Complications and risks: Potential damages of perforation and bleeding.

Cautions: This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Ethylen oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. For single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use

Procedure:

1. after dilating the tract with chosen size dilator, advance the access sheath with the dilator is slow but firm twisting motion, till it enters into the renal pelvis.
2. once the position is confirmed via fluoroscopy remove the dilator leaving the guidewire in place,
3. Start using sheath as working channel.

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.



1984 : CE Mark and NB identification number

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.STİ
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12
YENİMAHALLE -ANKARA
TEL:+90312 3959852
FAX:+90312 3959853

GEOTEK® URETERAL GİRİŞİM KILIFI

Kullanma Kılavuzu

TR

Endikasyonlar: Perkütan üreteral girişim prosedürleri sırasında üreteral dilatasyon ve endoskopların ve enstrümanın kullanıma sokulması için sürekli bir çalışma kanalı sağlar. Kılıf, tekrarlanabilir alet değişimi esnasında üreterdeki travmanın potansiyelini azaltarak korur.

Böbrek dilatasyonu sırasında travmatik olmayan çalışma yolu sağlamak için amplatz tipi dilatörler ve / veya balon dilatörleri ile birlikte kullanılır.

Kontraindikasyonlar: Ciddi enfeksiyonlar, tıkanma, inkontinans

Yan Etkiler: Potansiyel ureter hasarı ve kanama


Uyarılar: Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojeniktir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C desaklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız

Prosedür:

1. Renal trakt seçilen dilatörler ile dilate edildikten sonar, girişim kılıfı ve dilatörü döndürme hareketi ile ilerleterek renal pelvise yerleştirin.
2. Girişim kılıfının pozisyonu x-ray ile doğrulandığında, yerine kılavuz tel bırakarak iç dilatörü çıkartın.
3. Kılıfı çalışma kanalı olarak kullanmaya başlayın

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.

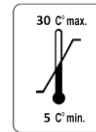

STERILE EO

Single Use Storage limits Expiry Date Ethylen oxide sterilized