

<b>Doküman No: IFU-SDJ</b> Documentation No: IFU-SDJ	<b>İlk yayın tarihi: 02/05/2012</b> Valid from: 02/05/2012	<b>Revizyon no: 03</b> Revision no: 03	<b>Sayfa:1</b> Page:1
		<b>Revizyon tarihi: 09.09.2016</b> Revision date:09.09.2016	

**GEOTEK® URETERAL STENT (SINGLE J )****Kullanma Kılavuzu****TR**

Her set; Tamamen radyopak Tek halkalı Üreteral Stent ve dilatörler, PTFE kaplı kılavuz tel ve hasta bilgi kartı içerir. Stent Tecoflex PU dan yapılmıştır, Bir ucu açık veya her iki ucu açık stent seçenekleri etikette belirtilmiştir.

**Endikasyonlar:** Üreter/böbrek veya mesanenin geçici eksternal drenajı için kullanılır

**Kontraindikasyonlar:** Ciddi enfeksiyonlar, obstrüksiyon, inkontinans

**Yan Etkiler:** Yabancı maddenin sebep olduğu böbrek / mesane iritasyonu, ağrı, enfeksiyon, artan miksiyon sıklığı, hematüri.

**Olası komplikasyonlar ve / veya riskler:** Üreteral stentlerin kireçlenmesi ve obstrüksiyonu ile dislokasyon, düzgün çalışmayı engelleyebilmekte ve böbrekte üriner taş oluşumuna yol açabilmektedir.

**Uyarılar:** Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır. **İmplantasyon süresi maksimum bir aydır**

Üreteral stentin işlemini sağlamak amacı ile üreteral stentin lokasyonu ile serbest pasajının ürianalizi ile kontrollerinin düzenli aralıklar ile yapılması gerekmektedir. İdrar yolunun inflamasyonları, üreteral stentin hızlı kireçlenmesine ve obstrüksiyonuna sebep olabilmektedir.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojektir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve stent ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C de saklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. **Yalnızca tek kullanım içindir.** Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız.

**Single J Stent Yerleştirme:**

- Kılavuz teli x-ray kontrolü altında renal pelvise yerleştirin.
- Stenti Kılavuz tel üzerinden itici yardımıyla ilerleterek yerleştirin.
- Stent doğru pozisyona yerleştiğinde, iticiyi sabit tutarak kılavuz teli geri çekin.
- Stentin yerinden emin olduğunuzda iticiyi çıkartın

**Not:** Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ  
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12  
YENİ MAHALLE / ANKARA  
TEL:+90312 395985 FAX:+90312 3959853

**GEOTEK® URETERAL STENT (SINGLE J )****Instruction for Use****ENG**

Ureteral Stent Kit with fully radiopaque single J stent , dilators , PTFE Guide wire and patient record card. Stents made of Tecoflex PU. Both end Open and One end Close stent types are indicated at the labels.

**Indications:** Ureteral stent is used for temporary external drainage from the ureteropelvic junction or the bladder

**Contraindications:** Serious infections, obstruction, incontinence

**Side Effects:** Kidney, bladder irritation caused by foreignbody, pain, infection, increased miction-frequency, hematuria

**Potential Complications and risks:** Disfunction caused by Dislocation, Obstruction and Encrustation of stents. It may cause calculi in the kidney.

**Cautions:** **Maximum indwelling time one month.** This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Regular monitoring of location and free passage of stent is necessary to evaluate stent efficiency. Inflammations of Urinary tract may increase the rate of encrustation and obstruction of the stent.

Ethylene oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. **For single Patient Use Only.** Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use.

**Placement of Single J Stent:**

- Place the guide wire in to Renal pelvis under x-ray control.
- Insert the Stent over guide wire and advance it with help of the pusher to placement area.
- When the stents reach target area, withdraw the guide wire while hold the pusher in current position.
- After stent positioned remove the pusher gently.


**Note:** These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.



1984 : CE mark and NB identification number



Single Use

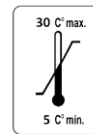

Storage limits



Expiry Date



Ethylene oxide sterilized